

I

UV-spot mobile



ATTENZIONE - Rispettare il manuale d'uso!

Il montaggio di accessori e componenti supplementari di apparecchiature può essere eseguito soltanto in conformità con quanto riportato dal manuale d'uso.

Lo UV-Spot mobile è disponibile in due diverse varianti:

- Apparecchio fisso **Spot 30**, composto da un corpo luminoso [3], due piedini del telaio rimovibili [10] (per KS 9 con 2 attacchi supplementari per il funzionamento sospeso), il dispositivo di protezione dai raggi [4] ed il cavo di collegamento con la spina per apparecchiature [8] e la spina UV [9].
- Dispositivo di attacco **Spot K**, composto da un corpo luminoso [14], il dispositivo di protezione dai raggi [13] con il cavo di collegamento spina UV [11]. Per il funzionamento del dispositivo di attacco è necessario come accessorio supplementare il dispositivo di fissaggio a parete. (KS 9 – N. id.: 50073943 / KS 12 – KS 18 – N. id.: 50073944)

Montaggio e messa in esercizio:

1. Il dispositivo di protezione dai raggi [4] è fissato sul corpo luminoso [3] con rispettivamente una vite a testa zigrinata. Svitare completamente le viti a testa zigrinata ed estrarre il dispositivo di protezione dai raggi.
2. Installazione delle apparecchiature:
 - Avvitare sull'apparecchio fisso (**Spot 30**) i due piedini [10] a sinistra e destra con le viti a testa zigrinata sul corpo luminoso. Posizionare l'apparecchio fisso al centro nello spazio utile. Inserire la spina [8] nella presa di corrente [7] sul corpo luminoso. Collegare la spina UV [9] ad uno dei due adattatori UV interni.
 - Per il tipo di apparecchiatura KS 9 sussiste la possibilità di alimentare il radiatore UV in combinazione con un dispositivo di fissaggio a parete. In questo caso al posto dei piedini sono utilizzati ed avvitati attacchi di sostegno [6].
 - Fissare il dispositivo di attacco (**Spot K**) con i due ganci [2] sul dispositivo di fissaggio a parete [1]. Collegare la spina UV [11] ad uno dei due adattatori UV interni.



AVVERTENZA – Radiazioni UV


Prima di collegare ed attivare lo UV-Spot mobile è necessario rimuovere tutti i mezzi ausiliari ed i campioni dallo spazio utile.




ATTENZIONE – Pericolo di ustioni!

Durante la disinfezione il radiatore UV raggiunge temperature molto elevate. Prima di smontare nuovamente lo UV-Spot mobile è necessario far raffreddare accuratamente il corpo luminoso!

Spot 30

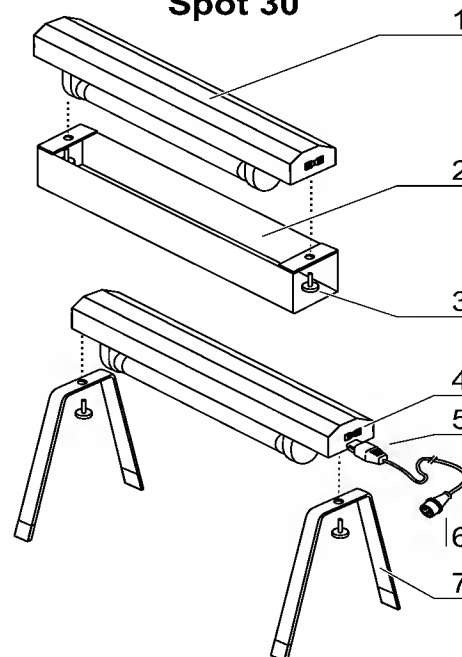

Spot K

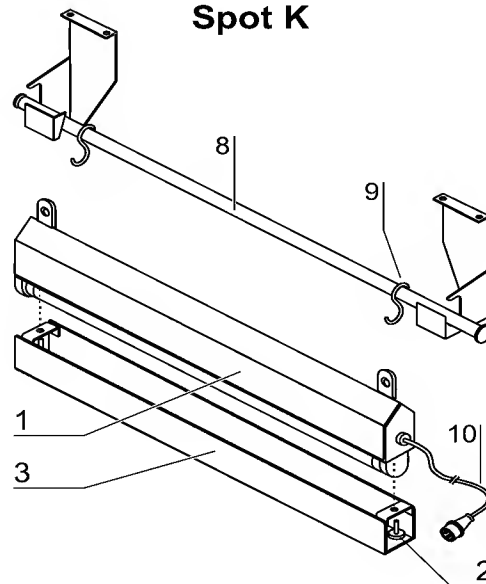

I

UV-spot mobile

3. Messa fuori servizio:

Estrarre il cavo di collegamento, svitare dall'apparecchio fisso i piedini. Avvitare il dispositivo di protezione dai raggi con le viti a testa zigrinata sul corpo luminoso.

Pezzi di ricambio

Denominazione	N. ordine:			
	SPOT 30		SPOT K	
	120 V	230 V	120 V	230 V
Montatura per inserimento	50043771	50043771	50043771	50043771
Alimentatore UV laterale 2 x 18 W 230 V		50048679		
Alimentatore UV laterale 2 x 15 W 120 V	50060299			
Alimentatore UVC radiatore 230 V				50048679
Alimentatore UVC radiatore 120 V			50060299	
UVC Degerminatore 15 W 435 mm lg		50048537		50048537
UVC Degerminatore 15 W 435 mm lg, 1	50060298		50060298	
Cavo con attacco	50048531	50048531	50048531	50048531
Piedino di posizionamento	50048676	50048676	50048676	50048676
Vite a testa zigrinata	50049781	50049781	50049781	50049781
Libretto d'istruzione	50077503	50077503	50077503	50077503

Dati tecnici

Denominazione	Unità	SPOT 30		SPOT K	
Larghezza	mm	80		60	
Altezza	mm	115		170	
Altezza con piedino	mm	310		365	
Lunghezza	mm	520		995	
Peso	kg	2		4,5	
Dati elettrici					
Tensione di taratura	Volt	120	230	120	230
Frequenza di taratura	Hz	60	50	60	50
Lunghezza onde	nm	254	254	245	245